



La mise en place et le suivi du système Flip Flo


Intitulé de la fiche	La mise en place et le suivi du système Flip Flo
Point(s) critique(s)	Toutes manipulations relatives au sondage vésical peuvent induire un risque majeur de transmission croisée d'agents biologiques.
Fiche à destination de	Unités de soins du CHC
Validation de l'information	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Date de la validation : le 01.03.2024
Références bibliographiques	Conseil supérieur de la santé
Fiche réalisée par	PCI HOST MOVE

Précisions préalables

- ✓ Le système Flip Flo : une valve de la sonde vésicale qui est utilisée pour fermer temporairement une sonde, avec option de vidange.
- ✓ Le système Flip Flo permet de conserver la fonction normale de stockage de la vessie.
- ✓ Le Flip Flo est stérile et emballé individuellement.
- ✓ **La décision de la mise en place du système Flip Flo relève de la responsabilité médicale (acte B2) et fait l'objet d'une prescription médicale.**



Le système de clamage

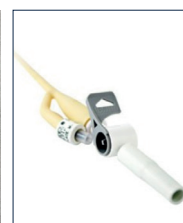

Le système Flip Flo

Critères qualité

	✓	✗
LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME FLIP FLO (ET REMPLACEMENT DU SYSTÈME FLIP FLO)		
Le soignant réalise l'hygiène des mains et porte de gants à usage unique non stériles		
Le soignant vide le sac collecteur		
Le soignant réalise une hygiène des mains après le retrait des gants		
Le soignant porte une nouvelle paire de gants à usage unique non stériles		
La sonde vésicale est clampée à l'aide d'un clamp prévu à cet effet (voir la photo ci-dessus)		
Le soignant désinfecte la connexion de la sonde vésicale et du sac récolteur à l'aide d'une compresse imbibée de Chlorhexidine alcool 2%, temps de contact 30 sec.		
Le soignant débranche le sac de la sonde vésicale (ou le Flip Flo en cas de remplacement)		
Le système Flip Flo est connecté à la sonde de façon aseptique		
Le sac collecteur est éliminé		
Le soignant réalise une hygiène des mains après retrait des gants		
LE SUIVI DU FLIP FLO		
Le soignant réalise une hygiène des mains avant le soin		
Le soignant porte des gants à usage unique non stériles		
Le soignant ouvre le système Flip Flo en poussant le levier vers le bas		
Après avoir laissé les urines s'écouler dans les toilettes ou dans un récipient, le soignant ferme le système en poussant le levier vers le haut.		
Désinfecter le robinet de vidange du système Flip Flo à l'aide d'une compresse imbibée de Chlorhexidine alcool 2%		
Le soignant réalise une hygiène des mains après retrait des gants		
Le Flip Flo est changé systématiquement en cas de changement de sonde		



Die Einführung und Überwachung des Flip-Flo-Systems


Titel der Karteikarte	Die Einführung und Überwachung des Flip-Flo-Systems
Kritische(r) Punkt(e)	Bei der Handhabung von Blasenkathetern besteht ein hohes Risiko der Übertragung von biologischen Stoffen.
Merkblatt an	Pflegeeinheiten des CHC
Validierung von Informationen	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Datum der Validierung: le 01.03.2024
Bibliografische Referenzen	Hoher Gesundheitsrat
Karteikarte erstellt von	PCI HOST MOVE

Vorherige Klarstellungen

- ✓ Das Flip-Flo-System: Ein Ventil am Blasenkatheter, das zum vorübergehenden Verschließen eines Katheters verwendet wird, mit der Option, diesen zu entleeren.
- ✓ Das Flip-Flo-System sorgt dafür, dass die normale Speicherfunktion der Blase erhalten bleibt.
- ✓ Der Flip Flo ist steril und einzeln verpackt.
- ✓ Die Entscheidung zur Verwendung des Flip-Flo-System liegt in der ärztlichen Verantwortung (Handlung B2) und ist Gegenstand einer ärztlichen Verordnung.



Das Klammersystem

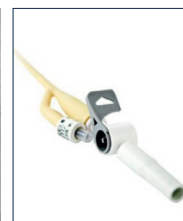

Das Flip-Flo-System

Qualitätskriterien

	✓	✗
DIE EINFÜHRUNG DES FLIP-FLO-SYSTEMS (UND DIE ERSETZUNG DES FLIP-FLO-SYSTEMS) :		
Die Pflegekraft führt die Handhygiene durch und trägt nicht sterile Einmalhandschuhe.		
Die Pflegekraft leert den Auffangbeutel		
Die Pflegekraft führt nach dem Ausziehen der Handschuhe eine Handhygiene durch.		
Die Pflegekraft trägt ein neues Paar unsterile Einmalhandschuhe.		
Der Blasenkatheter wird mit einer dafür vorgesehenen Klemme abgeklemmt (siehe Foto oben).		
Die Pflegekraft desinfiziert den Anschluss des Blasenkatheters und des Sammelbeckens mit einem mit Chlorhexidin-Alkohol 2% getränkten Tuch, Einwirkzeit 30 Sek.		
Die Pflegekraft trennt den Beutel des Blasenkatheters (oder den Flip Flo bei einem Ersatz).		
Das Flip Flo-System wird aseptisch mit der Sonde verbunden.		
Der Fangsack wird entsorgt		
Die Pflegekraft führt nach dem Ausziehen der Handschuhe eine Handhygiene durch.		
DIE NACHBEREITUNG DES FLIP FLO		
Die Pflegekraft führt vor der Pflege eine Handhygiene durch		
Die Pflegekraft trägt unsterile Einmalhandschuhe		
Die Pflegekraft öffnet das Flip Flo-System, indem sie den Hebel nach unten drückt		
Nachdem der Urin in die Toilette oder in einen Behälter abgelassen wurde, schließt die Pflegekraft das System, indem sie den Hebel nach oben drückt.		
Desinfizieren Sie den Ablasshahn des Flip-Flo-Systems mit einem Chlorhexidin-Alkohol 2% getränkten Tuch.		
Die Pflegekraft führt nach dem Ausziehen der Handschuhe eine Handhygiene durch.		
Der Flip Flo wird bei einem Wechsel der Sonde systematisch ausgetauscht		